



3181

avec accessoires
with accessories

Polycare

FAUTEUILS DE SOINS & DIALYSE • HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE
DIALYSIS & TREATMENT CHAIRS • ELECTRIC VARIABLE HEIGHT

Polycare

L'ALLIANCE DU CONFORT ET DE LA FONCTIONNALITÉ
A COMBINATION OF COMFORT AND FUNCTIONALITY



CONFORT

- > Mousse 80 mm d'épaisseur
- > Repose-bras réglables en hauteur, en profondeur et montés sur rotule
- > Contrôle indépendant de chacune des sections du fauteuil
- > 3 moteurs électriques
- > Cale-pieds manuel ou électrique (selon version et en option sur 3185)
- > Mouvement combiné des repose-bras et du dossier
- > Cale-pieds permettant un repositionnement du patient



ACCESSIBILITÉ

- > Repose-bras relevables pour un accès latéral facile
- > Hauteur variable de 55 à 84 cm



SÉCURITÉ

- > Position d'urgence spéciale
- > 4 roues à frein ø 125 mm
- > Capacité patient 200 kg
- > Dossier débrayable manuellement pour une mise en position d'urgence immédiate



HYGIÈNE

- > Accès facile à toutes les parties
- > Mécanisme simple et accessible au nettoyage

COMFORT

- > Foam thickness 80mm
- > Armrests adjustable in height, depth and with pivoting articulation
- > Each section can be controlled independently
- > 3 electric motors
- > Manual or electric footrest (according to models and as an option for 3185)
- > Combined electric armrest and legrest movements
- > Footrest allowing a patient repositioning

ACCESSIBILITY

- > Adjustable armrests for an easy access from the side
- > Variable height from 55 to 84cm

SAFETY

- > Trendelenburg
- > Set of 4 castors ø 125mm with brakes
- > Patient weight capacity 200kg
- > Manual-release backrest for immediate placement in the emergency position

HYGIENE

- > Easy access to all parts
- > Simple structure and easy to clean

Modèle présenté avec options/accessoires
Products shown with options/accessories



3185

Hauteur variable
Variable height

55 / 84 cm

Capacité
Capacity



200 kg



ACCUEIL
WELCOME



POSITION DE SOIN
TREATMENT POSITION



DÉCLIVE
TRENDELENBURG



POSITION ALLONGÉE
EXTENDED POSITION

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur variable électrique
 Dossier réglable par vérin électrique indépendant (3181 seulement)
 Repose-jambes réglable par vérin électrique indépendant (3181 seulement)
 Mouvement combiné de l'inclinaison de l'assise et la hauteur variable (mouvement électrique pour le 3181)
 Mouvement électrique combiné du dossier et des appui-bras (3181)
 Mouvement électrique combiné du dossier et du repose-jambes (3185)
 Cale-pieds réglable manuellement (3181)
 Commande manuelle (avec position d'urgence)
 Paire d'appui-bras réglable en polyuréthane noir sur rotule (3185)
 4 roulettes à freins ø 125 mm
 Structure acier avec finition époxy blanc
 Sellerie avec mousse 80 mm grand confort
 Poignées de poussée ergonomiques côté tête pour une maniabilité extrême
 Dossier débrayable manuellement pour une mise en position d'urgence immédiate
Poids maximum du patient autorisé 200 kg

STANDARD FEATURES

Electric height adjustment
 Electric independent backrest adjustment (only 3181)
 Electric independent legrest adjustment (only 3181)
 Combined seat incline and height adjustment (electric movement for 3181)
 Combined electric armrest and legrest movements (3181)
 Combined electric legrest and backrest movements (3185)
 Manual footrest adjustment
 Hand control (with emergency position)
 Pair of adjustable polyurethane armrests on ball & socket joint (3185)
 Set of 4 castors ø 125mm with brakes
 Steel frame structure with white epoxy finish
 Upholstery with 80mm thick foam
 Ergonomic push handles at the head foot guarantee outstanding manoeuvrability
 Manual-release backrest for immediate placement in the emergency position
200kg patient weight capacity

3181

Hauteur variable électrique - dossier électrique indépendant - repose-jambes électrique indépendant - Inclinaison d'assise et hauteur variable combinées - dossier & appui-bras combinés - cale-pieds manuel - cale-pieds électrique (option) • Electric height adjustment - independent electric backrest - independent electric legrest - combined seat incline & height adjustment - combined armrest & backrest - manual footrest - electric footrest (option)

3185

Hauteur variable électrique - dossier & repose-jambes combinés électriques - inclinaison d'assise et hauteur variable combinées - dossier & appui-bras combinés (option) - cale-pieds manuel (option) • Electric height adjustment - combined electric backrest & legrest - combined seat incline & height adjustment - combined armrest & backrest (option) - manual footrest (option)

OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine
 Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



3186

cale-pieds réglable manuellement
 Adjustable manual footrest
 (modèle/model 3185)



3188

cale-pieds électrique avec dispositif de rallonge manuel de 50 mm
 Electric footrest adjustment with manual mechanism for additional 50mm
 (modèle/model 3181)



3189

Protection plastique pour repose-jambes
 Plastic protection for legrest



3192-10

Accumulateur pour mouvement d'urgence
 Actuator for emergency positioning
 (modèle/model 3181)



25126-10

4 roulettes ø 125 mm avec freinage centralisé
 Set of 4 castors ø 125mm with centralized brakes



25351

Paire d'étau pour tablette
 Pair of clamps for tray



25350 + 25351

Tablette de lecture inclinable (+ 1x étau 25351)
 Adjustable reading tray (+ 1x clamp 25351)



3193

Tige porte-sérum 2 crochets inox, télescopique
 Stainless steel telescopic, 2 hook, IV pole



25360 + 25351

Tablette repas (+ 1x étau 25351)
 Meal tablet (+ 1x clamp 25351)



167-20

Porte-rouleau (long. maxi 50 cm, ø 20 cm)
 Paper roll holder (length max 50 cm, ø 20 cm)



11679-01

Appui-tête réglable
 Adjustable headrest



2537

Housse pour appui-bras
 Covers for armrest (modèle/model 3185)



3194-01

Support télécommande flexible avec fixation
 Flexible hand control support with clamp

3181

POIDS NET • NET WEIGHT : 120 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 145 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,20 M³

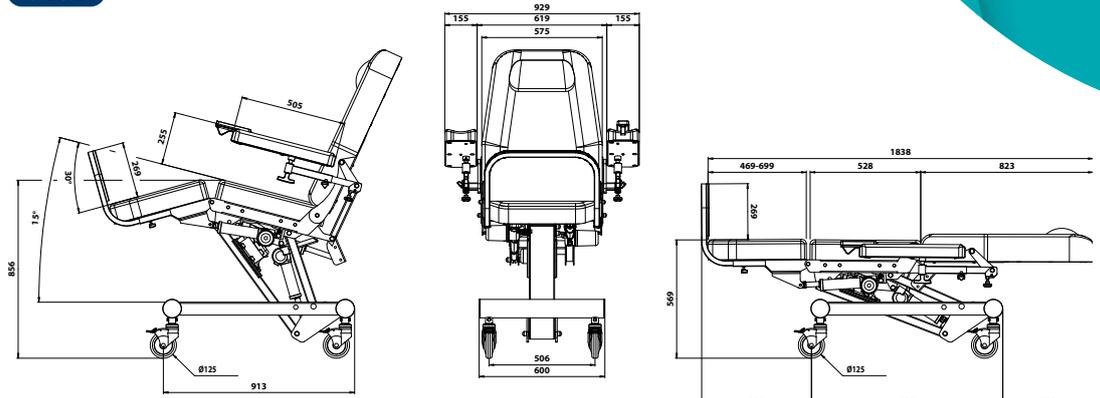
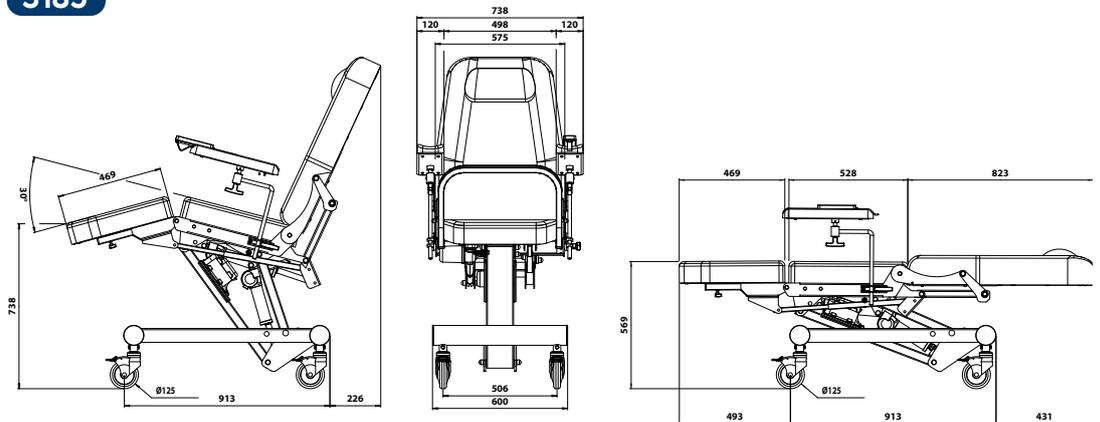
3185

POIDS NET • NET WEIGHT : 110 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 143 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,01 M³

**CHOIX DE SELLERIES NON-FEU
 M1 ANTIBACTÉRIEN**
**CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY**

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM


3181**3185**

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

* La gamme Élégance est soumise à l'application d'un supplément tarifaire. Merci de vous référer à la grille tarifaire.
 * The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.

FE-13/22



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM